
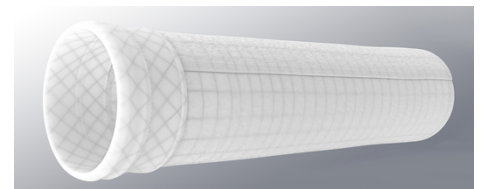


Poches pour filtre Nutsche

Sefar propose des disques et des poches filtrantes spécialement adaptés aux filtres Nutsche, répondant aux standards élevés des industries pharmaceutiques et chimiques en matière de certification et de traçabilité.

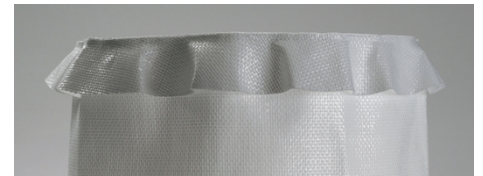

Caractéristiques produit

Solutions de filtre Sefar pour Filtre Nutsche

Les filtres sous pression Nutsche sont des systèmes de filtration simples, qui ont fait leurs preuves pour la séparation liquide-solide de lots de taille moyenne sur divers médias filtrants.

Dans les secteurs pharmaceutique et chimique, les filtres sous pression et les filtres monocouche sont utilisés sous formes très diverses.

DOWNLOADS

Brochure: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Solutions de fabrication

Les disques filtrants Sefar sont caractérisés par leurs dimensions précises et leur facilité d'installation.

Les bords des disques peuvent être fournis avec des ourlets, avec une corde ou découpés au laser, selon les besoins. Nous pouvons vous fournir, à partir de notre large gamme de matières premières pour filtres (tissus en polypropylène, polyester, PEEK et PTFE), la meilleure solution selon pour les conditions chimiques et thermiques de votre application. Des versions spécifiques client sont disponibles.

Marquage individuel

Version poche spécifique avec collerette



Sefar Inc.


Kansas City, MO – USA

Téléphone 800 995 0531
 Fax +1 816 452 2183

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

Ourlet avec corde

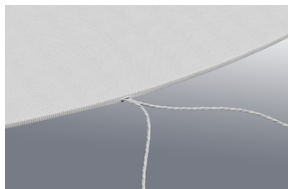

Les solutions de filtration Sefar pour les constructeurs/OEM

Nos produits répondent aux besoins spécifiques de ces applications de filtration et fonctionnent avec succès partout dans le monde sur toutes marques et OEM de filtres Nutsche, tels que:

Comber

Heinkel

Mavag AG

Waldner

Bachiller

Delta

Technologie du tissu

La technologie Sefar '**Double Layer Weave**' (Tissage Double Chaîne) réunit un tissu de filtration fin et un tissu support robuste. Les tissus SEFAR **TETEX** DLW sont produits dans nos ateliers de tissage européens avec du fil Sefar afin de garantir les exigences de qualité les plus élevées tout en offrant des avantages décisifs:

Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA

Téléphone 800 995 0531
 Fax +1 816 452 2183

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

- Temps d'arrêt réduit
- Rendement produit élevé
- Montage aisé
- Débatissage excellent
- Taux d'extractibles minimal

Afin de fournir un design optimisé, des tissus mono- et multifilament sont disponibles en plus du tissu double chaîne.

Tissu double chaîne




- Avec toile de renforcement intégrée pour un excellent drainage et une bonne stabilité

Tissu monofilament



- Pour une perméabilité maximale et des propriétés de nettoyage optimales

Tissu multifilament

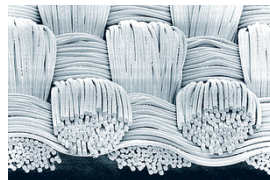

- Pour une rétention de particules, une résistance et une souplesse de tissu maximales

Fabriqué spécialement pour l' industrie de science de la vie

Sefar maîtrise chaque étape fondamentale de production depuis la production du fil jusqu'à la confection de filtres prêts à l'emploi, incluant la traçabilité complète de tout composant sensible. Cette situation, unique sur le marché, nous permet de fournir à nos clients des produits conformes à tous les niveaux de qualité et de conformité requis.

Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA

Téléphone 800 995 0531
 Fax +1 816 452 2183

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

Sefar a mis au point ses processus de production afin de répondre aux besoins spécifiques de l'industrie pharmaceutique. Nos produits filtrants exclusivement conformes aux GMP, sont confectionnés dans notre salle propre selon les directives rigoureuses des GMP.






- EC 1935/2004
- EU 10/2011
- GMP EC 2023/2006 or cGMP
- FDA CFR 177
- ISO 9001
- Emballage individuel
- Marquage individuel
- Traçabilité





CONTACT

-  **Contact local**
-  **Formulaire de contact**
-  **Envoyer e-mail**

Pour de plus amples informations, veuillez nous appeler:

Tel CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
 Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
 Phone: +1 418 690 0888
 Fax: +1 418 690 9499

 **E-Mail**



Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA
 Phone: 800 995 0531
 Fax: +1 816 452 2183

 **E-Mail**



Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA
 Phone: 800 995 0531
 Fax: +1 909 544 5901

 **E-Mail**

Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA

Téléphone 800 995 0531
 Fax +1 816 452 2183

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



Sefar Inc.

Gray, GA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 478 986 6953

■ **E-Mail**



Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA
Phone: 800 995 0531
Fax:

■ **E-Mail**

Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 816 452 2183

sales.us@sefar.com

[Aller à la page produit](#)